



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.



# Accessory manual

Carl-Oskar, Rebel, Carl-Oskar RA, Staffan RA, Rebel RA,  
Carl-Oskar TW, Staffan TW, Rebel TW, Svea TW.



# Content

---

**ENGLISH**

<b>Accessory overview</b>	<b>3</b>
<b>Assembly Tray</b>	<b>4</b>
<b>Assembly Slow Down Brake</b>	<b>4</b>
<b>Assembly cane holder</b>	<b>5</b>
<b>Assembly One Hand Brake</b>	<b>6</b>
<b>Assembly Back Support</b>	<b>7</b>
<b>Assembly Curb Climber</b>	<b>8</b>
<b>Assembly Splash Guard</b>	<b>9</b>
<b>Assembly Oxygen Holder</b>	<b>9</b>
<b>Assembly Basket</b>	<b>11</b>

**SVENSKA**

<b>Tillbehörsöversikt</b>	<b>12</b>
<b>Montering bricka</b>	<b>13</b>
<b>Montering släpbroms</b>	<b>13</b>
<b>Montering käpphållare</b>	<b>14</b>
<b>Montering enhandsbroms</b>	<b>15</b>
<b>Montering ryggband</b>	<b>16</b>
<b>Montering steghjälp</b>	<b>17</b>
<b>Montering stänkskydd</b>	<b>18</b>
<b>Montering Syrgashållare</b>	<b>18</b>
<b>Montering korg</b>	<b>20</b>

# Accessory Manual (ENG)

Carl-Oskar, Rebel, Carl-Oskar RA, Staffan RA, Rebel RA, Carl-Oskar TW, Staffan TW, Rebel TW, Svea TW.

## Accessory overview










Image	Description	Part no
	<b>Tray</b> Practical for resting light weight items.	<b>C-O &amp; Rebel:</b> 57 cm: 10651, 62cm, 67cm and 72cm: 10602
		<b>C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10602
		<b>Staffan RA/TW, Svea TW:</b> Not available
	<b>Slow down brake</b> Prevents the rollator from moving too fast and enables a controlled walking speed for the user.	<b>C-O &amp; Rebel:</b> 10620
		<b>C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10620
		<b>Staffan RA/TW, Svea TW:</b> Not available
	<b>Cane holder</b> Simplifies the transportation of a cane.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10603
		<b>Staffan RA/TW:</b> 40603
		<b>Svea TW:</b> Not available
	<b>One-hand brake</b> Allows the user to control brake functions with one hand.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10652
		<b>C-O RA/TW, Rebel RA/TW, Svea TW:</b> 10653
		<b>Staffan RA/TW:</b> 10653 (low) 10654 (high)


Image	Description	Part no
	<b>Backrest</b> Supports the back while resting.	<b>C-O:</b> 57 cm, 62cm and 67 cm models: 10621. Part no. for 72cm model: 10655
		<b>Rebel:</b> 57 cm, 62cm and 67 cm models: 10621. Part no. for 72cm model: 10655
		<b>All other models:</b> Not available
	<b>Curb climber</b> Helps raise the rollator onto a curb.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW, Svea TW:</b> 10612
		<b>Staffan RA/TW:</b> Not available
	<b>Splash guard</b> Protects legs and clothes. Sold in pairs.	<b>C-O, C-O RA/TW:</b> 10608
		<b>All other models:</b> Not available
	<b>Oxygen holder</b> Holds oxygen tube firmly in place.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10615
		<b>Staffan RA/TW:</b> 40605
		<b>Svea TW:</b> Not available
	<b>Basket with handle</b> Basket ideal for shopping.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10601
		<b>Staffan RA/TW:</b> 40601
		<b>Svea TW:</b> Not available

# Assembly Tray

ENG


## Carl-Oskar, Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW

Assemble the tray on to the seat of the rollator as according to picture. Remove the tray from the seat by pulling in the back of the tray.

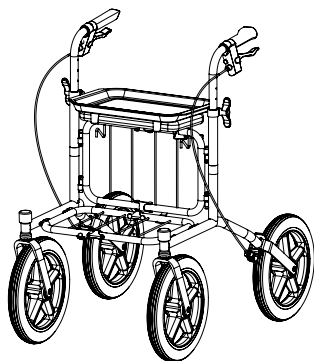

## Carl-Oskar and Rebel Reinforced

Place the tray on the seat and fasten it by pulling the straps around the seat and secure.

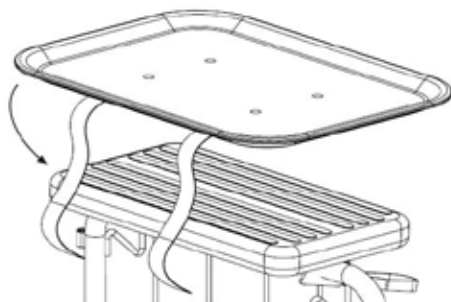

# Assembly Slow Down Brake

ENG

Place the two parts of the slow down brake above the rear fork (see picture 1).

Preassemble the slow down brake with the screws and the locking nuts.


Adjust by heightening or lowering so that the wear washer on the tyre brake can move easily without the slow down brake coming in its way. The slow down brakes wheel shall also be in the center of the rollators tyre.

Tighten the screws and assure that the slow down brake is hardly tightened.


## Adjustment of slow down brake (picture 2)

Tighten the knob until preferred pressure is attained (the harder pressure the more inert rolling of the rollator).

Lock the knob by tightening the nut.

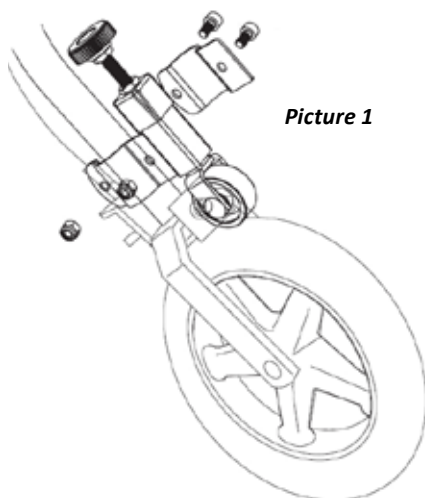

Picture 1

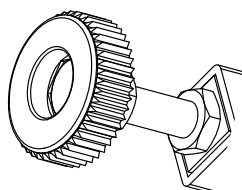


Picture 1


## Assembling upper part.

The cane holder is delivered in two main parts, an upper and a lower. These are in turn composed of two parts, verify that you have received them.


1. Open the clamp about that much it can be lead over the handle pipe.

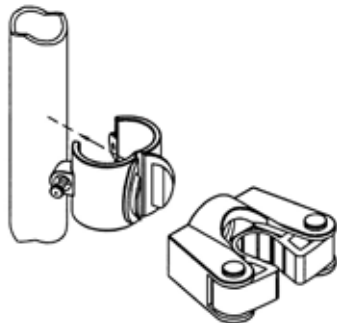

2. Before closing the clamp, take the attachment and lead the pliers of the clamp through the hole of the attachment. Attend on turning it in preferred position.

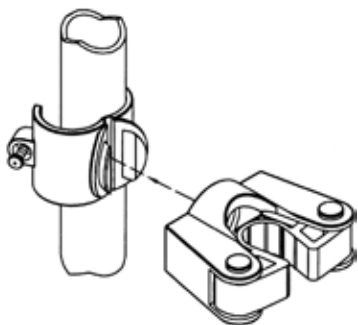


3. Close the clamp and tighten the screw. Note! Be careful.

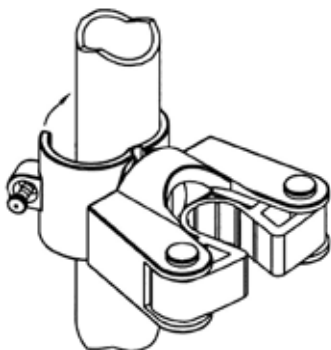


## Assembling lower part.

1. Open the clamp about that much it can be lead over the handle pipe.

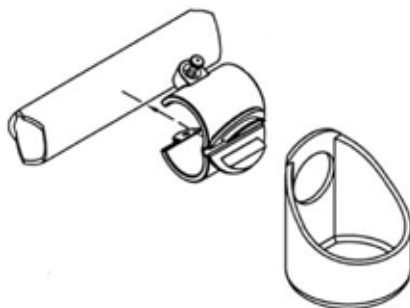

2. Before closing the clamp, take the cup and lead the pliers of the clamp through the hole of the attachment. Attend on turning it in preferred position.

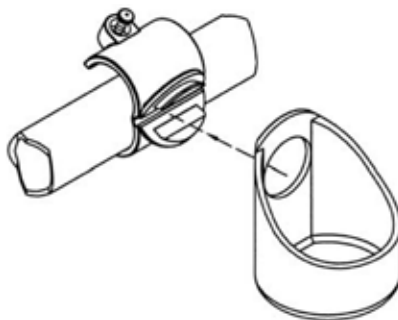

3. Close the clamp and tighten the screw. Note! Make sure that the cup is secured.




# Assembly One Hand Brake

ENG

The one-hand brake allows the user to brake the walking-aid with one hand.

The single hand brake can be assembled afterwards or be ordered as preassembled. When ordering a preassembled single hand brake, please state on which side the handle brake should be placed.

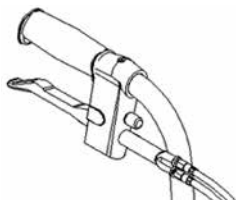

## Disassembling


1. Disassemble the wires from the wheels on both sides of the rollator. Disassemble the end cover (1) from the holder (5) and remove the wires and wire housings from the rollator.

2. Remove the brake lever (2) on the side which shall not be used as one-hand brake.

## Assembling

1. Attach the two adapters (6) in the end cover back (7).

2. Assemble the belonging wires and wire housings and attach the end cover back. Pull the wires around the roll (3) and secure it with the brake handle pin (4) to the brake lever. Attach the brake lever to the holder.
3. Assemble the wires to the wheels on each side. The shorter wire housing shall be assembled on the same side as the one-hand brake.
4. Adjust the brake with the adjustment screw for increased / decreased braking action.

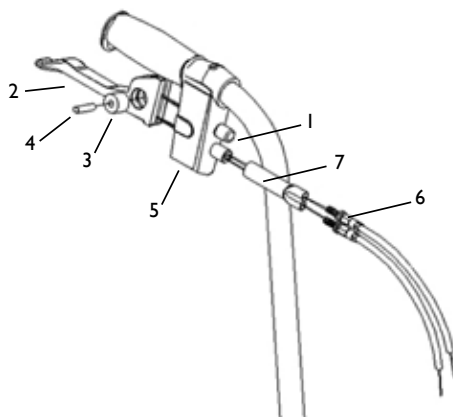

# Assembly Back Support

ENG

The back support comes with the following parts:


A: Holder (2st)

B: Holder (2st)


C: Screw M4x14 (4st)

D: Screw M4x20 (8st)

E: Nut M4 (8st)

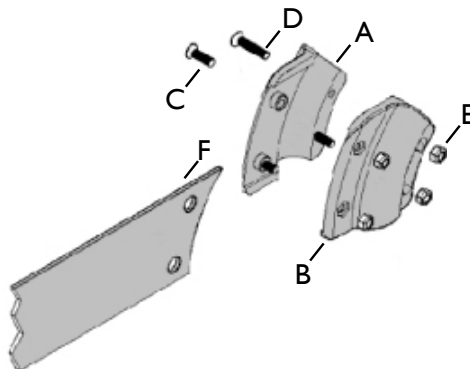


The back strap can be adjusted to different lengths

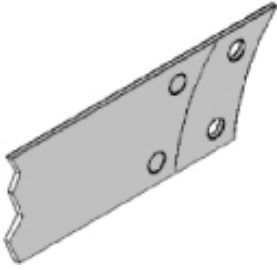

Fold both ends of the back strap (so they overlap each other) until preferred length is achieved.

Draw the radius and the holes on the underlying part and cut it along the marking.

Control measure the new end. The distance from the hole to the radius shall be 7mm.

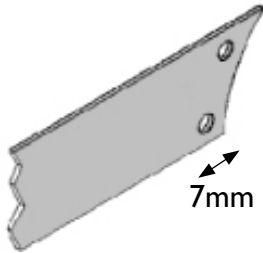


## Assembling of the back support to the rollator

Place the holders (A and B) to the pipe, where the bending begins, and put the end of the back strap between them.

Push the strap against the holder A so the two protruding cylinders pushes through the straps hole. Press the two holders against each other and tighten with the screws. The screw C is for the front holes where the back strap is fixed. The screw D is for the rear holes.

Pay attention to cracks and loose parts. Make sure the back support is firmly tightened by pulling it.


The rollator must NOT be hanged, carried or lifts in its back support.

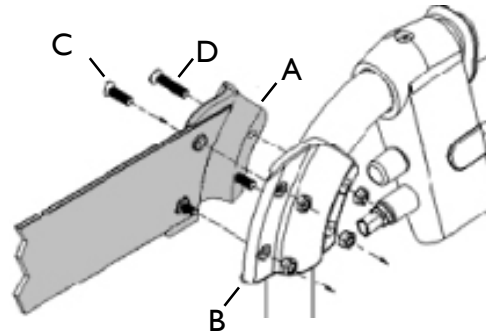


## Assembly Curb Climber

ENG

1. Disassemble pinbolt and nut.
2. Assemble the curb climber on the right or left inside of the rollator after height, as according to table.
3. Fix the curb climber with new pinbolt and nut.

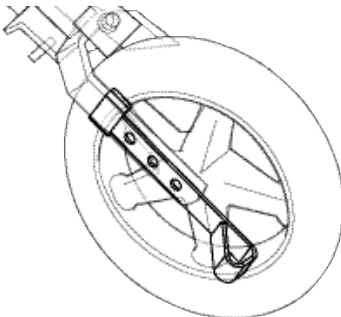


The curb climber has three holes which does it suitable for both Carl-Oskar, Rebel and Svea, and possible to set after height from ground.

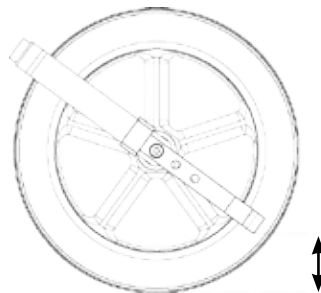

Distance between curb climber and ground, see table below.

Carl-Oskar	Rebel/Svea
61mm	-
76mm	22 mm
91mm	37 mm

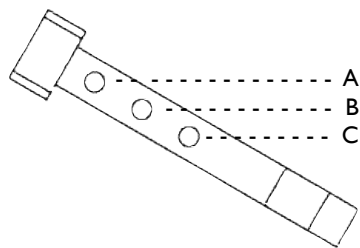

**Instructions for using the curb climber**


Place the sole on the curb climber and by moving the rollator backward, the front wheel lifts. Do not step on the curb climber.

Note! Pinbolt and nut must be replaced when assembling the curb climber.

# Assembly Splash Guard

ENG

The splash guard shall be assembled in the inside of the rollator by the attachment on to the rear fork.

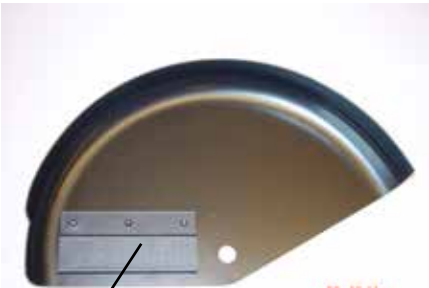

Attachment

**Assembled on the rollator**

Outside:




Inside:






## Assembling the oxygen holder


The oxygen holder is delivered complete with two preassembled straps

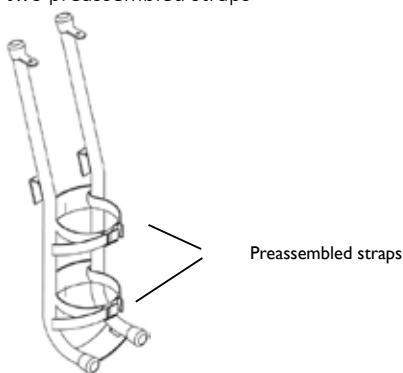

1. Loosen the straps before the tank is put in place by pushing the lock, on the strap, and pull out the loop to preferred size.


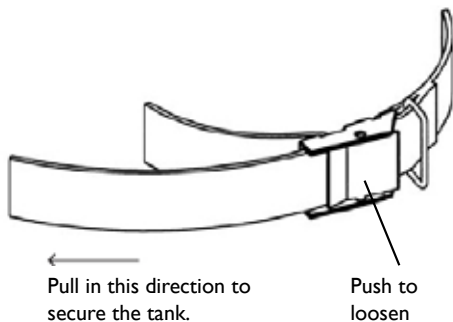


2. Tighten both straps when the tank is in place to secure it.

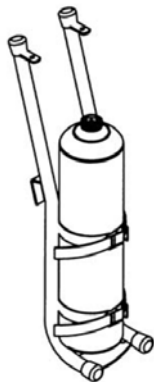


## Assembling the oxygen holder on the rollator

1. Tilt the oxygen holder and pull it through the upper gate. The holder shall be placed in the middle of the gate.

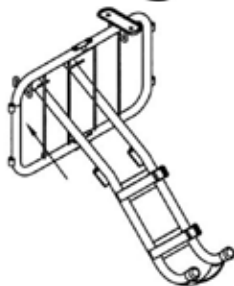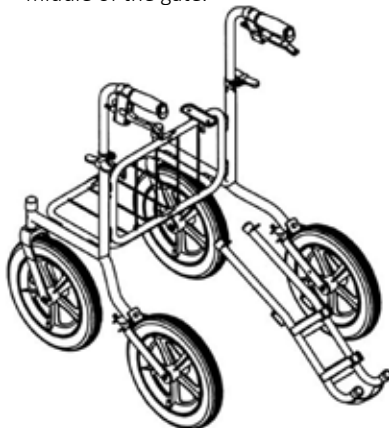


2. Hook the oxygen holder to the lower pipe of the gate and tilt it back (vertical) so that the upper attachment on the holder slides under the upper pipe of the gate.



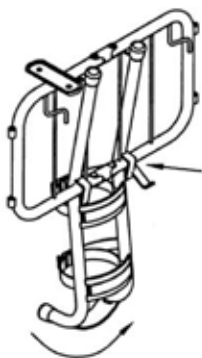

3. Make sure the oxygen holder is kept in place.

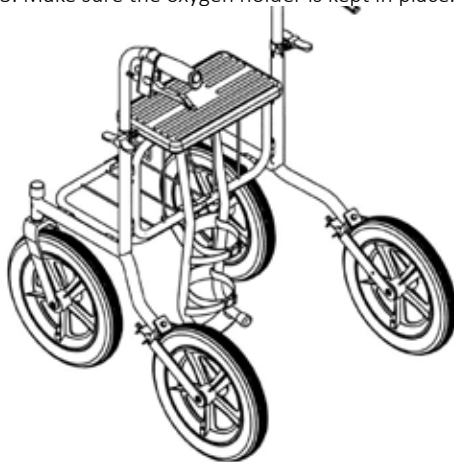


## Assembly Basket


ENG

### C-O & Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:

Place and attach the basket under both of the hooks with the straight side of the basket against the gate, as according to picture. Note! Placing of basket is only allowed when the rollator is in unfold position. Max load 10kg.

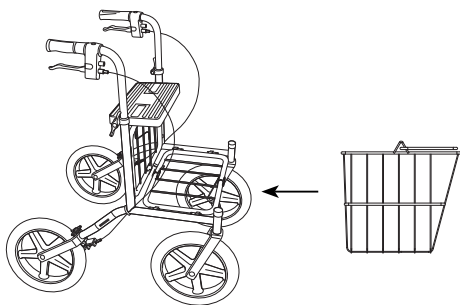

Clarification for placement of basket against the hook.

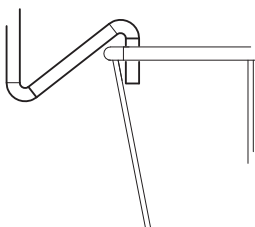

### Staffan RA/TW:

Assemble the basket on the rollator by hanging the basket in the hooks on the front of the rollator.



# Tillbehörsmanual (SE)

Carl-Oskar, Rebel, Carl-Oskar RA, Staffan RA, Rebel RA, Carl-Oskar TW, Staffan TW, Rebel TW, Svea TW.

## Tillbehörsöversikt










Bild	Beskrivning	Artikelnummer
	<b>Bricka</b> Underlättar förflyttning av saker.	<b>C-O &amp; Rebel:</b> 57 cm: 10651, 62cm, 67cm and 72cm: 10602
		<b>C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10602
		<b>Staffan RA/TW, Svea TW:</b> Finns ej
	<b>Släpbroms</b> Tillbehör som gör rollatorn mindre lättrullad.	<b>C-O &amp; Rebel:</b> 10620
		<b>C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10620
		<b>Staffan RA/TW, Svea TW:</b> Finns ej
	<b>Käpphållare</b> Underlättar medtagandet av käpp.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10603
		<b>Staffan RA/TW:</b> 40603
		<b>Svea TW:</b> Finns ej
	<b>Enhandsbroms</b> Möjliggör att styra bromsarna med en hand.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10652
		<b>C-O RA/TW, Rebel RA/TW, Svea TW:</b> 10653
		<b>Staffan RA/TW:</b> 10653 (låg) 10654 (hög)


Bild	Beskrivning	Artikelnummer
	<b>Ryggband</b> Ger ett stöd åt ryggen när brukaren vill sitta.	<b>C-O:</b> 57 cm, 62cm and 67 cm models: 10621. 72cm model: 10655
		<b>Rebel:</b> 57 cm, 62cm and 67 cm models: 10621. 72cm model: 10655
		<b>Andra modeller:</b> Finns ej
	<b>Steghjälp</b> Underlättar förflyttning över hinder.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW, Svea TW:</b> 10612
		<b>Staffan RA/TW:</b> Finns ej
	<b>Stänkskydd</b> Skyddar ben och klädsel.	<b>C-O, C-O RA/TW:</b> 10608
		<b>Andra modeller:</b> Finns ej
	<b>Oxygenholder</b> Ger säker förvaring av syrgastub.	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10615
		<b>Staffan RA/TW:</b> 40605
		<b>Svea TW:</b> Finns ej
	<b>Korg</b> Underlättar vid inköp och utflykter. maxvikt: 10 kg	<b>C-O &amp; Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:</b> 10601
		<b>Staffan RA/TW:</b> 40601
		<b>Svea TW:</b> Finns ej

# Montering bricka

SE


## Carl-Oskar, Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW

Montera brickan på rollatorns sits enligt figur. Brickan demonteras från sitsen genom att dra i brickans bakkant.

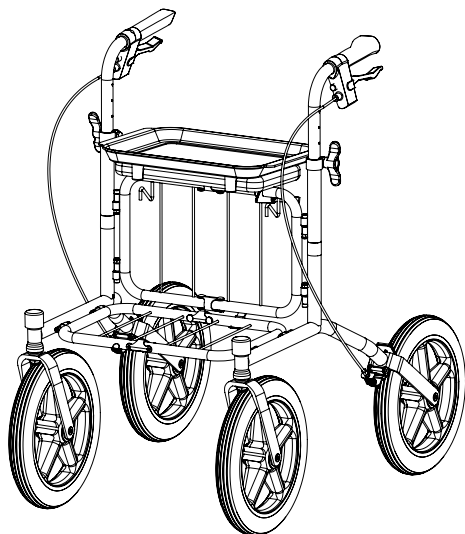

## Carl-Oskar och Rebel förstärkt

Placera brickan på sitsen och fäst den genom att dra spännbanden runt sitsen och dra åt.

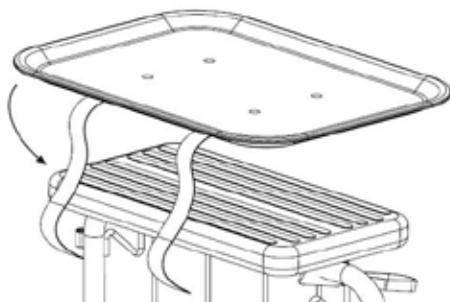

# Montering släpbroms

SE

Placera släpbromsens två delar ovanför bakgaffeln (se bilden).

Förmontera släpbromsen med skruvarna och låsmuttrarna.

Justera i höjdled så att slitbrickan på däckbromsen kan röra sig fritt utan att släpbromsen är i vägen. Släpbromsens hjul ska även vara i centrum av rollatorns hjul.


Dra åt skruvarna och försäkra dig om att släpbromsen sitter ordentligt fast.



## Inställning av släpbromsen

Skruva åt ratten tills önskat tryck på hjulet uppnås (ju hårdare tryck desto trögare rullar rollatorn).

Lås fast ratten genom att dra åt muttern.

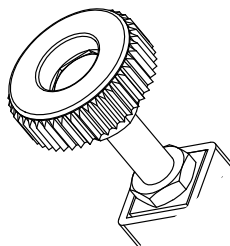


## Montering käpphållare

SE


### Montering överdel

Käpphållare levereras i två huvuddelar, en överdel och en underdel. Dessa består i sin tur består av ytterligare två delar, kontrollera att du har fått dessa.


1. Öppna klamman så pass mycket att den kan föras över handtagsröret.

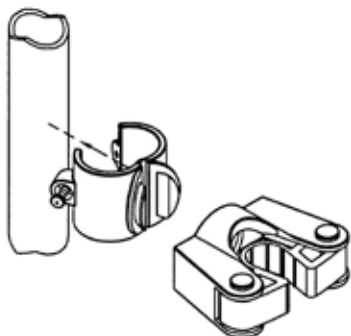

2. Innan klamman stängs, ta fästet och för in klammans griptänder genom hålet i fästet. Passa på att vrida den i önskad läge.

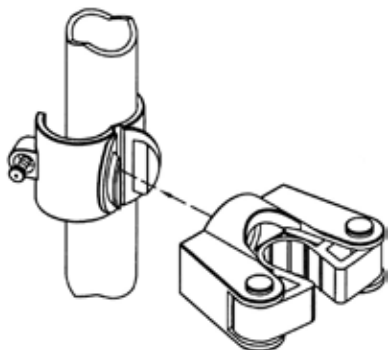


3. Stäng klamman och skruva åt skruven. OBS! Kontrollera att fästet sitter fast.

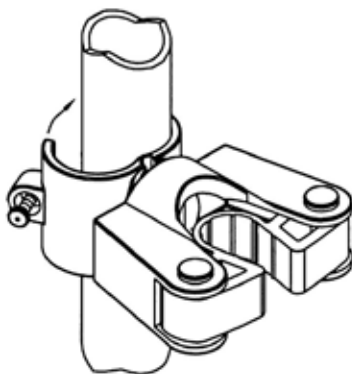


### Montering överdel


1. Öppna klamman så pass mycket att den kan föras över sidoröret.

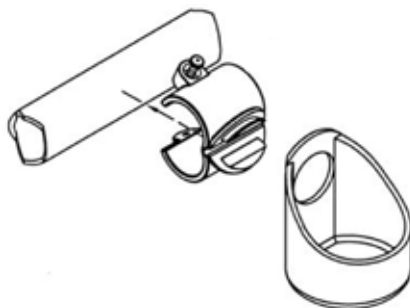

2. Innan klamman stängs, ta koppen och för in klammans griptänder genom hålet i koppen. Passa på att vrida koppen i önskad läge.

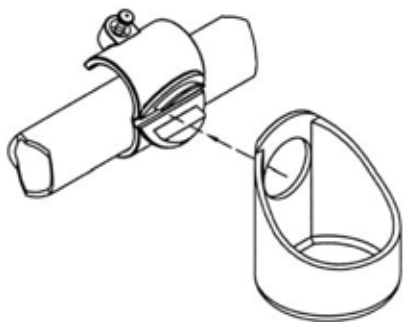

3. Stäng klamman och skruva åt skruven. OBS! Kontrollera att koppen sitter fast.

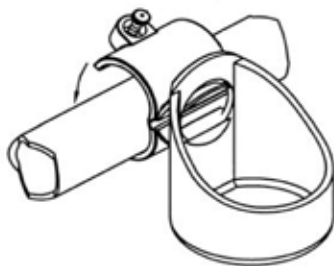


## Montering enhandsbroms

SE

Enhandsbromsen tillåter brukaren att bromsa hjälpmedlet med en hand.

Enhandsbromsen kan eftermonteras eller beställas fabriksmonterade. Vid beställning av fabriksmonterad enhandsbroms, ange vilken sida

3. Montera åter fast wirarna vid hjulen på respektive sida. Det kortare wirehöljet ska monteras på samma sida som enhandsbromsen monterats på.
4. Justera bromsen med justerskruven för ökad / minskad bromsverkan.

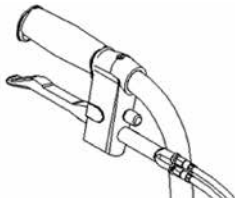


### Demontering

1. Demontera wirarna vid hjulen på båda sidorna av rollatorn. Demontera hylsan (1) från hållaren (5) och avlägsna wirarna och wirehöljerna helt från rollatorn.
2. Tag bort bromshandtaget (2) på den sidan som inte ska användas som enhandsbroms.

### Montering

1. Skruva fast de två adaptrarna (6) i hylsan (7).
2. Montera tillhörande wirar och wirehöljen och fäst åter hylsan (7). Dra wirarna runt brytrullen (3) och säkra rullen med sprinten (4) i bromshandtaget. För in bromshandtaget i hållaren.

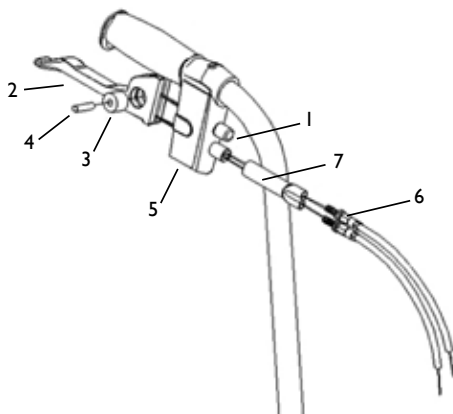

Ryggbandet levereras med följande detaljer:

A: Hållare (2st)


B: Hållare (2st)

C: Skruv M4x14 (4st)


D: Skruv M4x20 (8st)

E: Mutter M4 (8st)

F: Ryggband (1st)

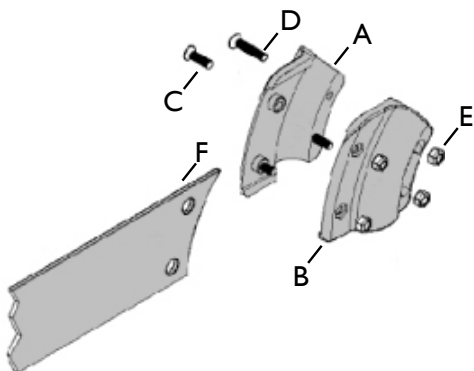


## Ryggbandet kan anpassas till olika längder

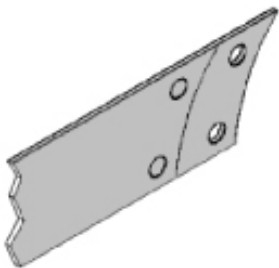

Vik ihop ändarna på ryggbandet (så att de överlappar varandra) tills den önskvärda längden uppnås.

Rita av radien och hålen på den underliggande delen och såga av efter markeringen.

Kontrollmät den nya änden. Från radie till hålet ska avståndet vara 7mm.

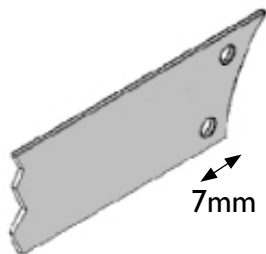


## Montering av ryggbandet på rollatorn

Placera hållarna (A och B) på röret där bockningen startar och skjut in ryggbandets ände mellan de.


Tryck bandet mot hållaren A så att de två utstickande cylindrarna tränger igenom ryggbandets hål. Pressa de två halvorna mot varandra och skruva ihop. Skruven C går i de två främre hålen där ryggbandet är fixerat och skruven D går i de bakre hålen.

OBS! Var uppmärksam mot sprickor och lösa delar. Kontrollera att ryggbandet är ordentligt fastspänt genom att dra i det.


Rollatorn får INTE hängas, bäras eller lyftas i ryggbandet.

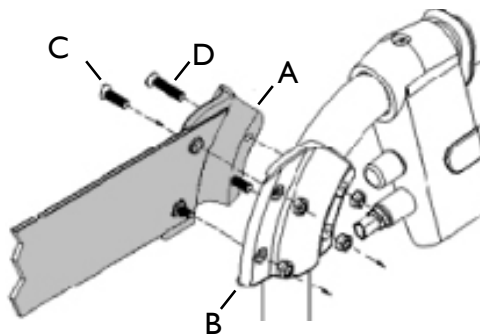

1. Demontera hjulbult och mutter.
2. Montera steghjälpen på höger alternativt vänster insida efter höjd, enligt tabell nedan.
3. Fixera steghjälpen med ny hjulbult och mutter.

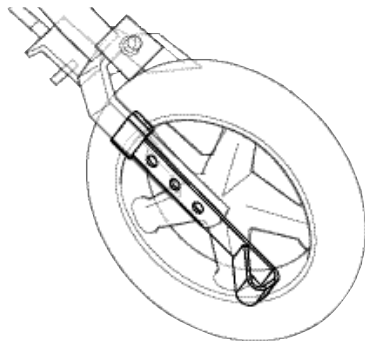


Steghjälpen har tre hål vilket gör den anpassad för Carl-Oskar, Rebel och Svea samt går att ställa efter önskad höjd från marken.

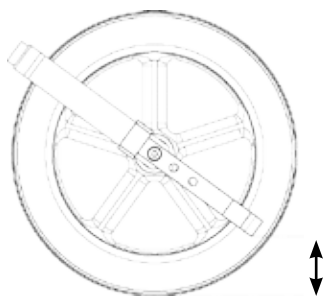

Avstånd mellan steghjälp och mark, se tabell ovan.

Carl-Oskar	Rebel/Svea
61mm	-
76mm	22 mm
91mm	37 mm

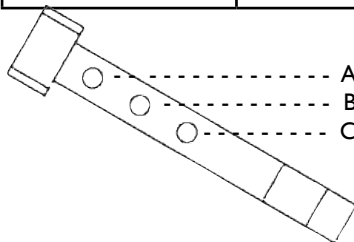

## Instruktioner för användning av steghjälp

Placera fotsulan på steghjälpen och genom att föra rollatorn bakåt kommer framhjulen att lyfta. Trampa inte på steghjälpen.


OBS! Hjulbult och mutter måste bytas vid montering av steghjälp.



# Montering stänkskydd

SE

Stänkskyddet ska monteras på insidan av rollatorn genom att haka fast det på bakgaffeln.

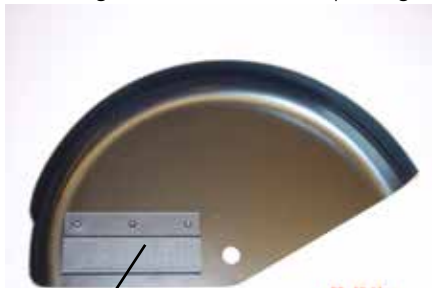

Fäste

## Montering på rollatorn

Utsida:



Insida:




# Montering Syrgashållare

SE


## Montering syrgastub

Syrgashållare levereras komplett med två förmonterade spännband.

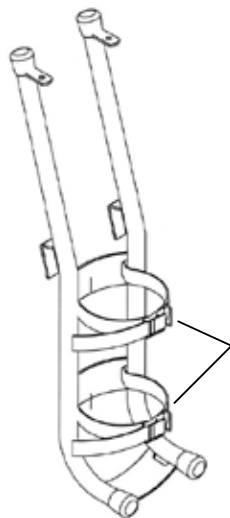

Förmonterade spännband.


1. Lossa spännbanden innan gasflaskan sätts in genom att trycka in låsets platta på spännbandet och dra ut öglen till önskad storlek.

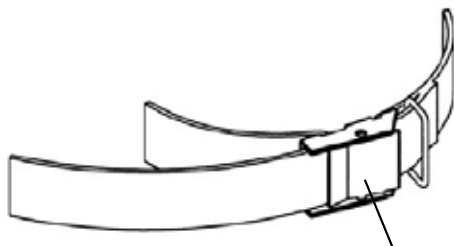

Dra åt i denna riktning för att säkra tuben



Tryck in för att lossa

2. Dra åt båda spännbanden när tuben är väl på plats för att säkra den.


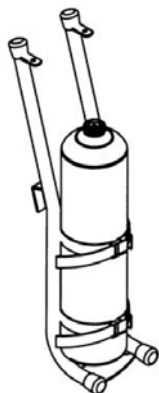


### Montering på rollatorn


1. Vinkla syrgashållaren och för in den genom övergrinden. Hållaren ska placeras i mitten på grinden.

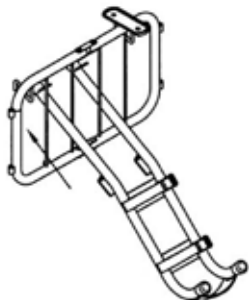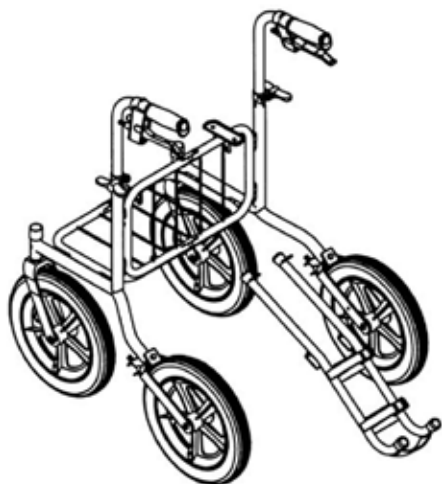

2. Haka fast syrgashållaren i grindens nedre rör och vinkla tillbaka (lodrätt) så att det övre fästet på syrgashållaren glider under grindens övre rör.

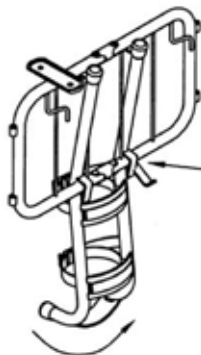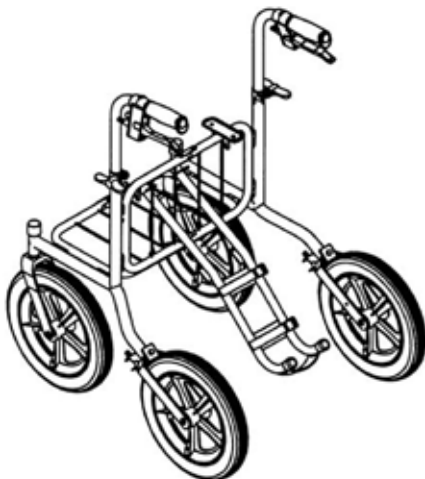


3. Känn efter att syrgashållaren sitter på plats.

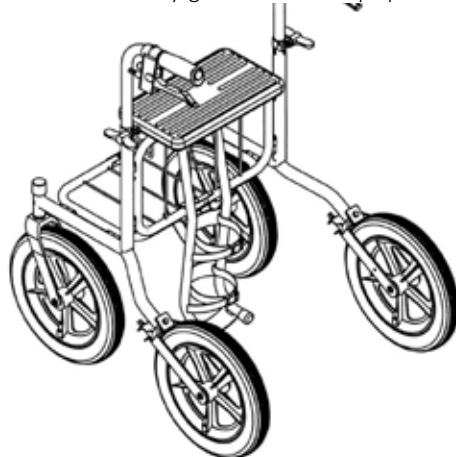


**C-O & Rebel, C-O RA/TW, Rebel RA/TW:**

Placera och fäst korgen under båda krokarna med den raka sidan av korgen mot grinden, enligt bild. OBS! Placering av korgen får endast ske när rollatorn är i utfällt läge. Max last 10kg.

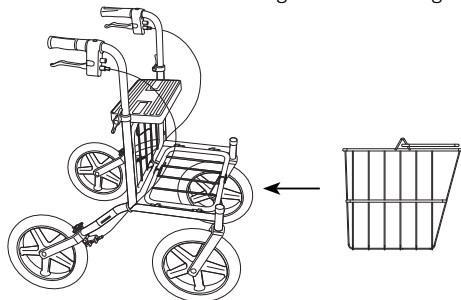

Förtydligande placering av korg mot krok.

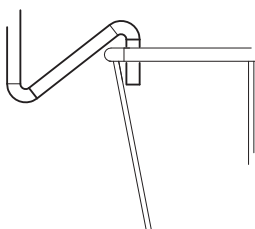**Staffan RA/TW:**

Montera korgen på rollatorn genom att hänga korgen i dess krokar på rollatorns främre del.



### **HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**

Årstaängsvägen 21C  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
E-post: info.se@humancaregroup.com  
www.humancare.se

### **HUMAN CARE CANADA**

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone:- 613.723.6734  
Fax:- 613.723.1058  
Email: info.ca@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com

### **HUMAN CARE UNITED STATES**

4210 S. Industrial Drive, Suite 160  
Austin, TX 78744  
Phone: 512.476.7199  
Fax: 512.476.7190  
Email: info.us@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com

### **HUMAN CARE AUSTRALIA**

Unit 4, 49 Bertie Street  
Port Melbourne, Victoria 3207  
Phone:- 1300 132 736  
Fax:- [03] 9645 4954  
Email: info.au@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com

### **HUMAN CARE NETHERLAND**

Els peterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: 0577-412171  
Fax: 0577-412170  
Email: info.nl@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com

